


IPG SURGICAL FIBER HP

Волоконный инструмент для лазерной урологии

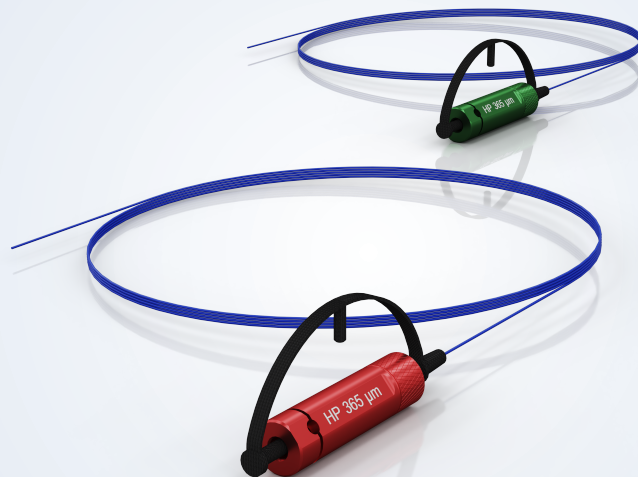

Применение

- ▶ Фрагментация и распыление камней почек, мочеточников и мочевого пузыря
- ▶ Эндоскопическая энуклеация, вапоризация и иссечение ДГПЖ
- ▶ Рассечения стриктуры уретры
- ▶ Вапоризация опухолей почки, мочевого пузыря и мочеточников
- ▶ Рассечение шейки мочевого пузыря (BNI)
- ▶ En-bloc резекция опухоли мочевого пузыря
- ▶ Пластические урологические манипуляции
- ▶ Коагуляция мягких тканей


Основываясь на многолетнем опыте в сфере производства волоконных лазеров для урологии, компания IPG разработала и произвела линейку волоконного инструмента с торцевым типом дистального конца «IPG Surgical Fiber» High Power, предназначенного для использования с медицинскими лазерными аппаратами повышенной мощности.

Для использования с гибким эндоскопическим инструментом компанией IPG специально разработан волоконный инструмент диаметром 150 мкм, отличительными особенностями которого являются максимальная гибкость, проводимость высоких мощностей, а также лучшее качество эндоскопической картинки за счет более свободной ирригации.

«IPG Surgical Fiber» High Power - волоконный инструмент, идеально подходящий для выполнения эндоскопических, лапароскопических и открытых операций в урологии.

Для всей линейки волоконного инструмента «IPG Surgical Fiber» High Power используется разъём SMA-905- стандарт для урологических лазерных систем.

Буферное защитное покрытие «IPG Surgical Fiber» High Power обеспечивает передачу больших мощностей без повреждения волоконного инструмента.

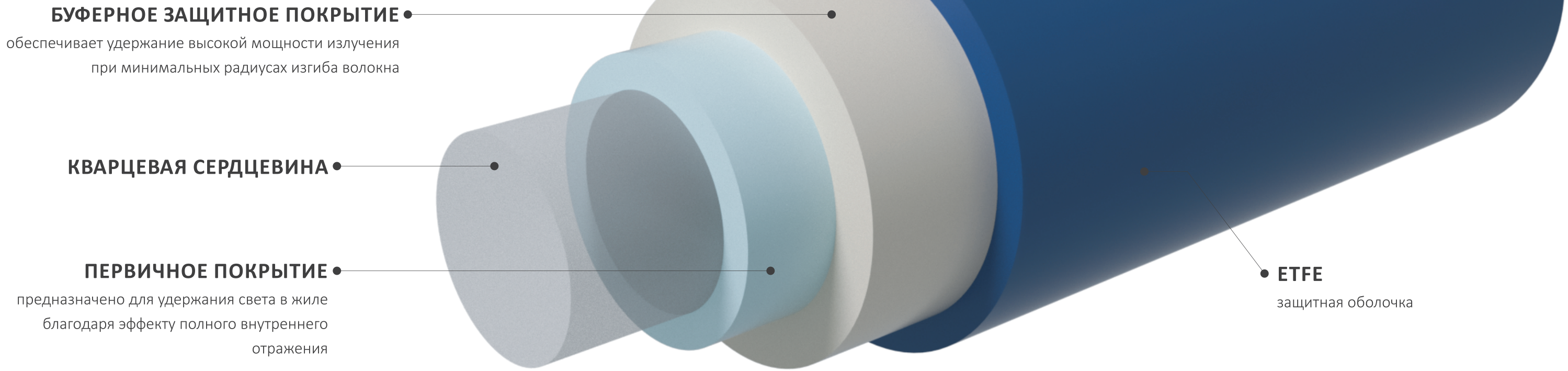

IPG Surgical Fiber

Волоконный инструмент IPG Surgical Fiber всех диаметров доступен как в одноразовом исполнении, так и в многоразовом

IPG Surgical Fiber HP Multiple Use

IPG Surgical Fiber HP Single Use

Характеристики					
	Диаметр волокна, мкм (сердцевина)				
	150	200	365	550	940
Тип оптического волокна	кварц/кварц				
Длина волоконного инструмента, м	не менее 3				
Тип разъема	SMA-905				
Числовая апертура	NA=0.22				



IPG Photonics Corporation

World Headquarters
Oxford, MA USA
+1 508 373 1100
sales.us@ipgphotonics.com

IPG Laser GmbH

European Headquarters
Burbach, DE
+49 2736 44200
sales.europe@ipgphotonics.com

ИПЭ-Полюс

IPG Россия
Фрязино, Московская обл.
+7 496 255 74 46
mail@ntoire-polus.ru

Brazil

+55 11 4380 9939
sales.br@ipgphotonics.com

China

+86 10 6787 3377 ext. 1020
sales@ipgbeijing.com

Czech Republic

+420 241 433 199
sales.cz-sk@ipgphotonics.com

France

+33 (0) 388 674 974
sales.france@ipgphotonics.com

India

+91 956 060 8808
sales.india@ipgphotonics.com

Italy

+39 0331 170 6900
sales.italy@ipgphotonics.com

Japan

+81 45 716 9831
info@ipgphotonics.co.jp

Mexico

+52 81 1354 2540
ipgmexico@ipgphotonics.com

Poland

+48 32 721 22 20
sales.poland@ipgphotonics.com

Singapore

+65.667.87709
sales.singapore@ipgphotonics.com

South Korea

+82 42 930 2000
ipgk@ipgphotonics.com

Spain & Portugal

+34 937 999 971
sales.spain@ipgphotonics.com

Taiwan

+886 2 27 93 3582
ahung@ipgphotonics.com

Turkey

+90 216 306 0317
sales.turkey@ipgphotonics.com

United Kingdom & Ireland

+44 0 117 203 4060
sales.uk@ipgphotonics.com